

Instrukcja obsługi

Uchwyt z przyssawkami zapewnia bezpieczne trzymanie na każdej gładkiej powierzchni bez konieczności wiercenia.

Łatwy w montażu i mocno trzyma się powierzchni.

Stanowi wsparcie, ułatwia poruszanie się w wannie, kabynie prysznicowej oraz przy toalecie.

Można go łatwo zdemontować i przymocować ponownie w nowym miejscu.

Wymiary: 28,5x8,5x9 cm.

Maksymalne obciążenie uchwytu: 100 kg.


Uwaga: uchwyt nie jest przeznaczony do podtrzymywania całkowitej masy ciała użytkownika.

Instrukcja użytkowania:

1. Dokładnie oczyść powierzchnię, do której chcesz przymocować uchwyt, a także same przyssawki – usuń wszelkie zanieczyszczenia, osusz i odtłuść.



2. Do montażu nie są potrzebne żadne narzędzia – wystarczy mocno docisnąć przyssawki do czystej, gładkiej powierzchni (**omijając fugi**), a następnie opuścić dźwignie w dół, aby uchwyt się zamocował.

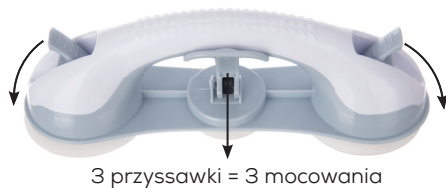

3 przyssawki = 3 mocowania

Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy uchwyt został prawidłowo zamocowany!

3. Aby zdemontować uchwyt i zamocować go w innym miejscu, unieś dźwignie do góry, w ten sposób go odczepisz.



Wskazówka dotycząca użycia:
Środkowa przyssawka służy również jako wieszak na akcesoria do mycia lub higieny.



MADLO S PŘÍSAVKAMI
MADLO S PŘÍSAVKAMI
HELPING HANDLE
530880



Návod na obsluhu

Madlo s přísavkami zajistí bezpečné uchopení na jakémkoli rovném povrchu bez vrtání. Snadno se připevní a pevně drží.

Je oporou, usnadní pohyb ve vaně, sprchovém koutě i u toalety.

Je možné ho snadno odinstalovat a připevnit znovu na nové místo.

Rozměry: 28,5x8,5x9 cm.

Maximální zatížení madla je 100 kg.


Upozornění: Madlo není určeno k podpoře celé hmotnosti uživatele.

Instrukce pro použití:

1. Povrch, na který chcete madlo připevnit, a samotné přísavky na madle pečlivě očistěte od případných nečistot, vysušte a odmastěte.




2. K instalaci není potřeba žádné náradí, pouze silou přitiskněte přísavky na rovný čistý povrch (**mimo spáry**), kam chcete madlo připevnit. Sklopte páčky směrem dolů, tím dojde k jeho přichycení.

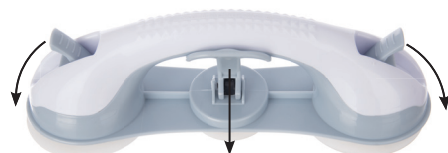

3 přísavky = 3 uchycení

Před prvním použitím vyzkoušejte, zda je madlo správně připevněno!

3. Pokud chcete madlo naopak po čase odstranit a připevnit na jiné místo, uvolněte páčky na madle směrem nahoru, tím dojde k jeho uvolnění.

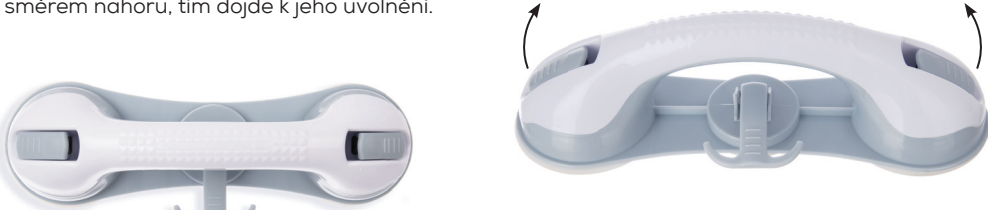

Tip pro použití:
Prostřední přísavka zároveň slouží jako věšák na mycí či hygienické potřeby.

Návod na obsluhu

Madlo s přísavkami zaistí bezpečné uchopenie na akomkoľvek rovnom povrchu bez vŕtania. Ľahko sa pripevní a pevne drží.

Je oporou, uľahčí pohyb vo vani, sprchovacom kúte aj pri toalete.

Je možné ho ľahko odinštalovať a pripevniť znova na nové miesto.

Rozmery: 28,5x8,5x9 cm.

Maximálne zaťaženie madla: 100 kg.


Upozornenie: Madlo nie je určené na podporu celej hmotnosti užívateľa.

Inštrukcie na použitie:

1. Povrch, na ktorý chcete madlo pripevniť, a samotné přísavky na madle starostlivo očistite od prípadných nečistôt, vysušte a odmastite.




2. Na inštaláciu nie je potrebné žiadne náradie, iba silou pritlačte přísavky na rovný čistý povrch (**mimo škáry**), kam chcete madlo pripevniť. Sklopte páčky smerom dole, tým dôjde k jeho prichyteniu.

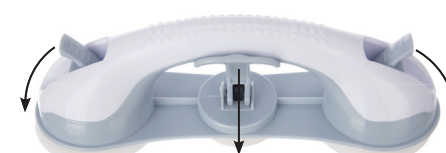

3 přísavky = 3 uchycenie

Pred prvým použitím vyskúšajte, či je madlo správne pripevnené!

3. Pokiaľ chcete madlo naopak po čase odstrániť a pripevniť na iné miesto, uvoľnite páčky na madle smerom hore, tým dôjde k jeho uvoľneniu.

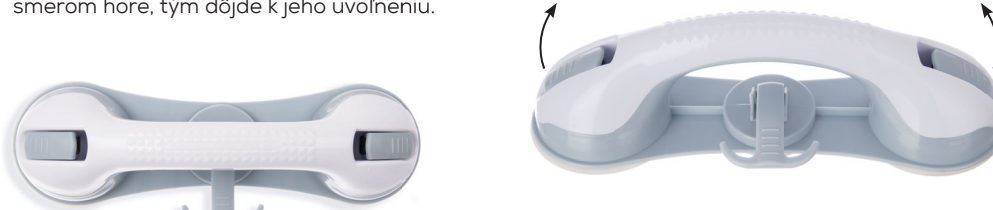

Tip na použitie:
Prostředná přísavka zároveň slúži ako vešiak na umývacie či hygienické potreby.